

TRANSFORMADOR DE PAREDE 3,5V LED  
**MÓDULO INTEGRADO**

Redução de Custos

Maior Proteção

Flexibilidade

Durabilidade.



Com recursos avançados e design moderno, o Módulo Integrado de Exames Clínicos oferece uma experiência de diagnóstico eficiente e conveniente.

**Redução de custos.** As lâmpadas de LED possuem baixo consumo de energia. O módulo poderá ser alimentado na rede elétrica bivolt ou através de três pilhas alcalinas tipo "C" com autonomia\* superior a seis meses. (\*uso médio de 8 horas/dia).

**Maior Proteção.** Sistema antifurto, as cabeças dos instrumentos podem ser travadas nos cabos do módulo, impedindo a remoção não autorizada.

**Flexibilidade.** A funcionalidade VERSÁTIL de alimentação por pilhas permite instalar o módulo no local mais adequado do consultório, pois a sua instalação independe da posição das tomadas elétricas e a alta performance da iluminação mantém-se preservada.

**Durabilidade.** O módulo possui garantia exclusiva de 05 anos e as lâmpadas de LED possuem vida útil superior a 10.000 horas, que garantem a confiabilidade e a qualidade dos produtos MD.

Módulo configurável entre as diversas cabeças de instrumentos 3.5V LED MD, vendidas separadamente para melhor personalização.

Liga automaticamente quando retirado da base e desliga automaticamente quando devolvido. Quando não estiver em uso e não devolvido à base, a iluminação desliga-se após 5 minutos.


Design leve e compacto, com superfícies arredondadas fáceis de limpar.

Cabo com reostato para controle da intensidade de luz.

Cabo em espiral com alcance de 3,0m para melhor posicionamento nos exames.



Opção de módulo com 1 cabo

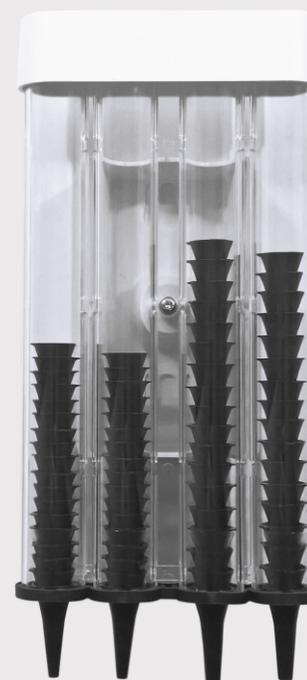

Dispensador de espéculos (opcional).

Espéculos para diferentes tamanhos de pacientes.

O módulo pode ser expandido e customizado para atender as necessidades de cada especialidade clínica:

- Módulo com 1 ou 2 cabos.
- Dispensador de espéculos MD.
- Esfigmomanômetro VISIO 7000 MD.
- Termômetros IR MD.
- Medidor de Sinais Vitais BMI.

## ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES OPCIONAIS



Otoscópio  
Fibra Óptica 3.5V LED MD



Iluminador  
de Garganta LED MD



Oftalmoscópio  
Coaxial 3.5V LED MD



Otoscópio  
Cirúrgico LED MD



Retinoscópio  
Streak 3.5V LED MD



Iluminador Nasofaríngeo  
LED com Espelho MD



Iluminador LED  
com Abaixador de Língua MD



Iluminador  
Curvo LED MD



Iluminador  
Nasal LED MD



Dispensador  
de Espéculos MD